


Item Line up



歯科用設置例

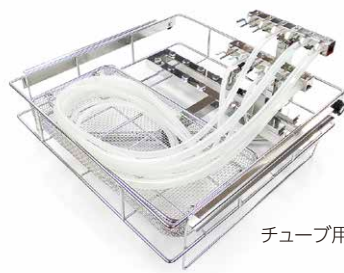


チューブ用設置例

各種ラック、バスケット、スタンドを用意。
詳しくは、オプションカタログをご覧ください。

Process

AW-150 / AW-180

多彩な洗浄／消毒コースを搭載 「すすぎ10分」から「93℃10分洗浄／消毒」まで、多彩なコースを搭載。

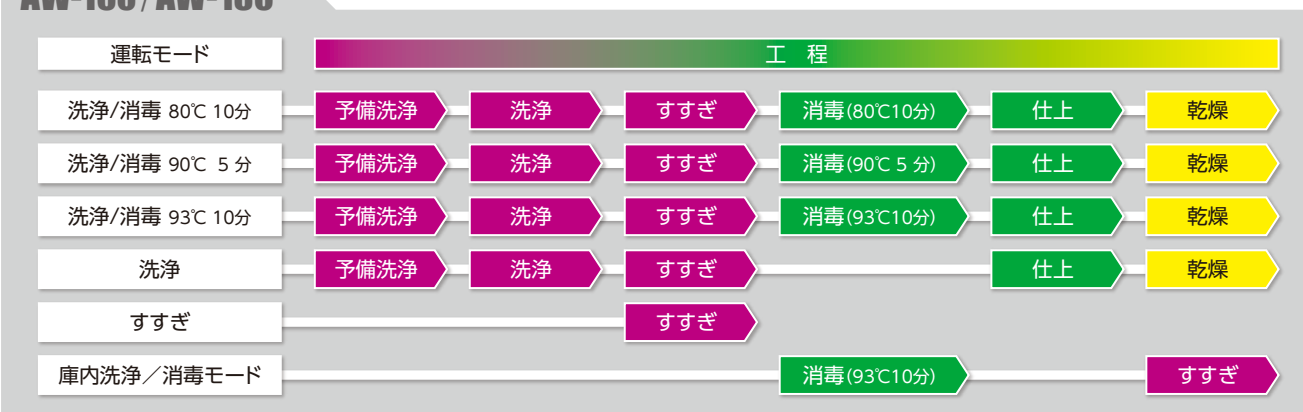

※乾燥・仕上剤(乾燥促進潤滑防錆剤)の工程あり/なしは選択できます。

Specifications

主な仕様

| 販売名 | ウォッシャー・ディスインフェクター AW-150 | ウォッシャー・ディスインフェクター AW-180 |
|-------|---|--------------------------|
| 一般的名称 | 器具除染用洗浄器 | 器具除染用洗浄器 |
| 機器の分類 | 一般医療機器(クラスI) | 一般医療機器(クラスI) |
| 届出番号 | 20B2X10010000004 | 20B2X10010000006 |
| 電源電圧 | 単相AC200V±10%(50/60Hz) | 三相AC200V±10%(50/60Hz) |
| 消費電流 | 14A | 30A |
| 外形寸法 | W580×D600×H840mm | W644×D690×H1396 |
| 槽内寸法 | W500×D480×H490mm(118ℓ) | W560×D540×H524(154ℓ) |
| 重量 | 87kg(本体) | 148kg(本体) |
| 洗浄剤 | 専用多酵素洗浄剤、専用酵素洗浄剤、専用アルカリ洗浄剤、乾燥促進潤滑防錆剤 | |
| 標準機能 | 排水冷却機能、温風乾燥機能、洗剤自動計量・投入機能(AW-150:2系統、AW-180:3系統) 純水すすぎ機能(AW-180のみ) | |

※仕様・カタログ等の掲載内容は製品改良のため予告無く変更する場合があります。



製造販売

チヨダエレクトリック株式会社



本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田124
TEL：026-273-1800 FAX：026-272-5723
●お問合せ：営業部 TEL：026-214-1802
<http://www.chiyoda-electric.co.jp>

販売店



器具除染用洗浄器

AW-150 / AW-180

ウォッシャー・ディスインフェクター



AW-150



AW-180



診療現場の安全と効率化をめざし、 洗浄・消毒・乾燥を全自動で。


業務効率化のため、容量UPタイプをラインナップ。

AW-180 収納量UP、標準でDINバスケット6枚積載可能。



AW-180内部

AW-150

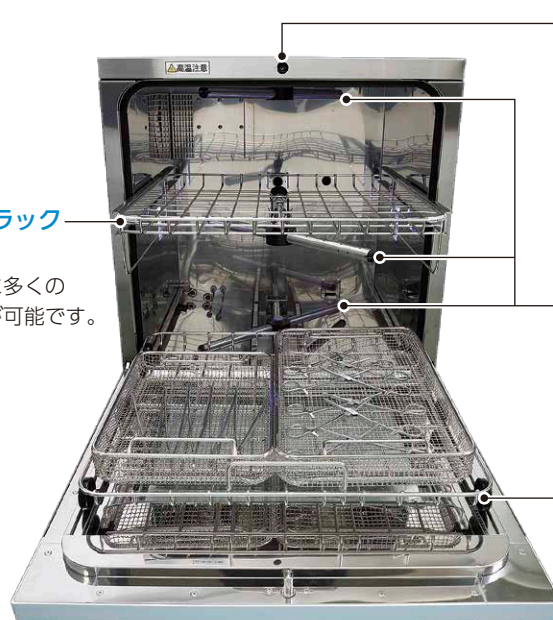

AW-150内部

二段ラック方式
一度に多くの洗浄が可能です。

扉電磁ロック方式
扉の開錠はタッチパネルから行えます。洗浄中にうっかり開けてしまうことを防止します。

回転式ノズルシャワー方式
3か所に設けたシャワーノズルで均一に万遍なく洗浄が行えます。

スムーズライド方式
各段がスライドレールにより引き出せるので、洗浄物のセットが簡単に行えます。

Option

専用バスケット



AW-180用 (W485×D250×H50)
※DIN規格対応
AW-150用 (W420×D210×H50)
※専用バスケットは別売りのオプション品です。

専用ラック



専用ラック(オプション)を使用することで、DINバスケット最大8枚積載可能。
※AW-180の場合

Features



手洗いのリスクを低減



限られたスペースを有効に活用
※AW-150の場合



日本語表示のカラータッチパネル




SDカードスロット装備
※SDカードはオプション




排水冷却機能




洗剤自動計量・自動投入
※AW-180は洗剤2種と仕上剤1種接続可能
AW-150は洗剤1種と仕上剤1種接続可能

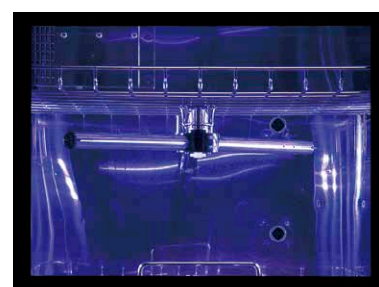

洗浄槽内が見えるガラスドア採用

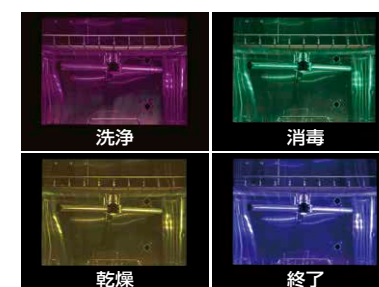

洗浄の進行状況を色で表現

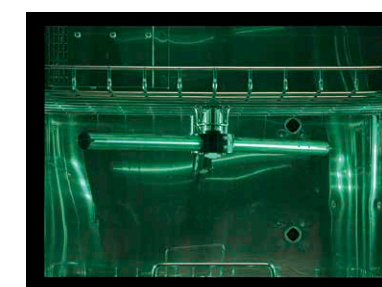

93°C消毒コースを搭載