

● ● ● ● 熱風乾燥装置

# ● ● ● ● DC300 / DC600

ウォッシャー・ディスインフェクター洗浄後の  
効率的な乾燥を実現



Made in JAPAN


- 特長
- WDの乾燥工程を省略することで、短時間で効率的な乾燥処理が可能です。
  - 乾燥物量に合わせ27L、150Lの2機種から選択が可能です。
  - 洗浄バスケット・棚板が標準付属の為、ご導入後すぐ使用可能です。
  - DIN規格バスケットもSET可能です。(DC600)
  - 乾燥温度や時間が設定できるので、金属やプラスチック等様々な材質の乾燥が可能です。

## バスケット設置例 (DC600の場合)



※バスケットが標準付属のため購入後すぐに使用可能です。

## 操作パネル

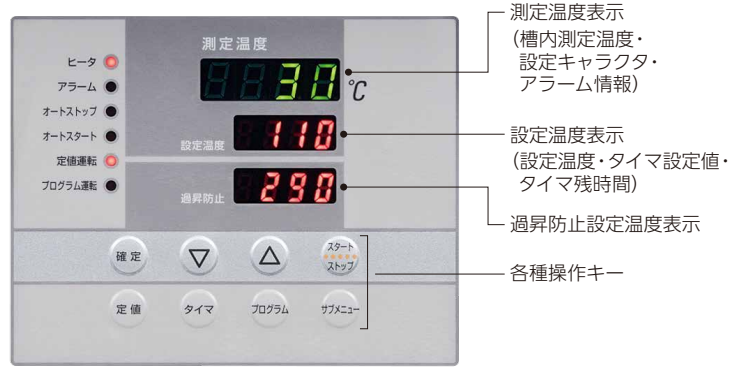

測定温度表示  
(槽内測定温度・  
設定キャラクタ・  
アラーム情報)

設定温度表示  
(設定温度・タイマ設定値・  
タイマ残時間)

過昇防止設定温度表示

各種操作キー

## Specifications

### 各種仕様

内容	DC 300	DC 600
乾燥方法	強制熱風循環	
外形寸法	幅410×奥行451×高さ670 mm	幅710×奥行651×高さ870 mm
有効内寸法	幅300×奥行300×高さ300 mm	幅600×奥行500×高さ500 mm
内装	ステンレス鋼板	
使用温度範囲	室温+10~200℃	室温+10~200℃
ヒーター	SUSパイプヒーター	
ヒーター容量	0.8KW	1.34KW
安全装置	温度センサ異常、ヒータ異常、メモリ異常、SSR短絡、自動過昇防止異常、測定温度異常、 過電流付漏電ブレーカ、過昇防止器	
重量	約 35kg	約 65kg
電源	AC100V 8.5A	AC100V 14A
内容積	27L	150L
棚板耐荷重	15kg/枚	
付属品	ドレンパン 棚板 2枚 メッシュバスケット (L250×W235×H50) 2個	ドレンパン 棚板 3枚 メッシュバスケットA AB-420 (L420×W210×H50) 4個
オプション品	DC300用 専用架台 DC300用 棚板	DC600用 専用架台 DC600用 棚板

### 関連製品

## AW-150

### ウォッシャー・ディスインフェクター

販売名：ウォッシャー・ディスインフェクター AW-150

一般的名称：器具除染用洗浄器

機器の分類：一般医療機器 (クラス I)

届出番号：20B2X10010000004

製造販売：チヨダエレクトリック株式会社



※仕様・カタログ等の掲載内容は製品改良のため予告無く変更する場合があります。



製造販売

チヨダエレクトリック株式会社



本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田124

TEL：026-273-1800 FAX：026-272-5723

●お問合せ：営業部 TEL：026-214-1802

http://www.chiyoda-electric.co.jp

販売店

